


Attends® Slip Active



Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader



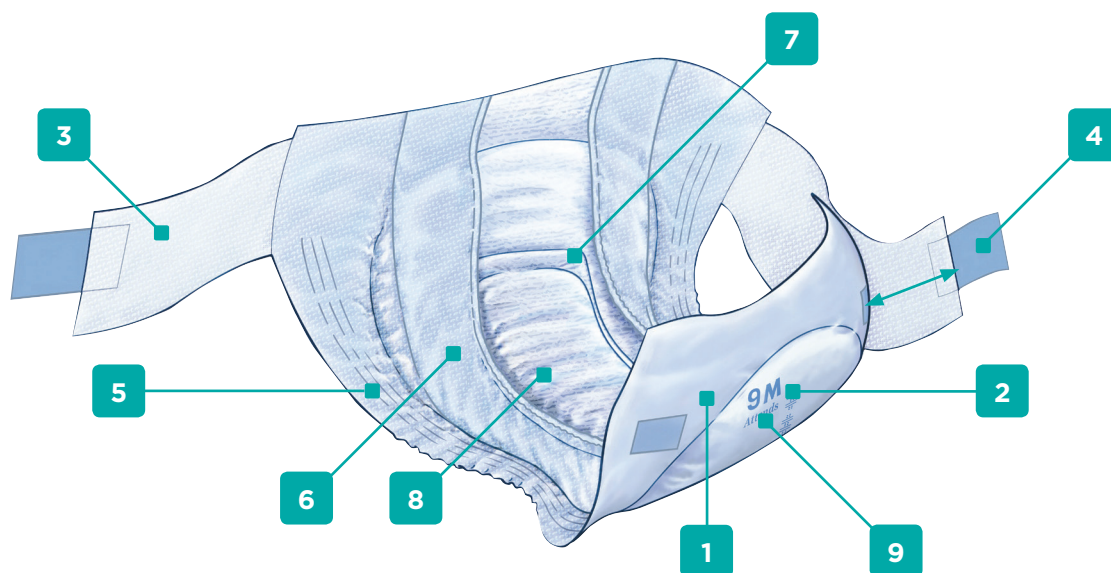

Attends Slip Active er en serie diskrete alt-i-ett tapebleier som er utviklet for tung inkontinens.



- | | | |
|---|---|--|
| 1 Hvit vanntett bakside. | 2 Våtindikatoren gir en indikasjon på når bleien bør skiftes. | 3 Pustende tekstillignende festebelter gir økt komfort og støtte rundt midjen samt god hudomsorg. |
| 4 Et to-steps fikseringssystem som gjør det enkelt å tilpasse og fikse Attends Slip Active: Bruk den blå borrelåsen på sidene til å feste bleien midlertidig, juster fikseringen ved behov, og fest tilslutt den ekstra brede tapen. | 5 Formet benelastikk for optimal passform og redusert risiko for lekkasje. | 6 Lekkasperrer reduserer risikoen for lekkasje. |
| 7 Anatomisk utformet kjerne gir en tettsittende og komfortabel passform. | 8 Superabsorberende kjerne med Odour Protection gir økt lekkasjesikkerhet, tørrhet i overflaten og reduserer risikoen for ubehagelig lukt. | 9 Informasjon om produktets størrelse og absorpsjonsnivå er trykket på baksiden av bleien for enkel håndtering. |

For mer informasjon, besøk www.attends.no

Absorpsjon / størrelse

		Antall pr. pose Antall poser pr. kartong	NAF-nummer Artikkelnummer	Hofte- og livviddemål (cm)	Bakside	Materiale i absorpsjonskjernen	Overflatemateriale	Pustende	Elastikk	Lekkasjesperrer	Fiksering for flergangsbruk	Odour Protection	Quick-Dry teknologi
9	Attends Slip Active Medium 	28 4	902071 201510	75 - 110	Polyethylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og super absorberer med Quick-Dry teknologi	Non-woven	Ja - Vinger	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	910939 201398	100 - 145	Polyethylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og super absorberer med Quick-Dry teknologi	Non-woven	Ja - Vinger	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium 	28 4	824981 201411	75 - 110	Polyethylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og super absorberer med Quick-Dry teknologi	Non-woven	Ja - Vinger	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2	852932 201435	100 - 145	Polyethylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og super absorberer med Quick-Dry teknologi	Non-woven	Ja - Vinger	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry er distribusjonslaget som er plassert rett under overflaten hvor væsken trekkes inn i produktet. Dette laget absorberer væsken raskt bort fra huden og inn i produktet, og hindrer at væsken returnerer til overflaten. Distribusjonslaget kan håndtere flere urinavganger uten å miste effektiviteten i særlig grad. Dette fører til optimal tørrhet mot brukerens hud samt lekkasjesikkerhet.



pH-verdi

Kjerneteknologien med de spiralformede fibrene i distribusjonslaget garanterer en lav pH-verdi som ligner hudens. Dette beskytter huden og bidrar til god hudomsorg.



Active Zone

Active Zone er et område midt i produktet, med høy absorpsjonsevne der det virkelig trengs. Høy absorpsjon her gir optimal tørrhet og lekkasjesikkerhet for brukeren.



Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection reduserer risikoen for ubehagelig lukt.



Attends Slip er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning.